



RENAISSANCE®

*Váš pomocník na cestě ke zdraví*



## KATALOG MAGNETOTERAPEUTICKÝCH PŘÍSTROJŮ RENAISSANCE®

- + pro domácí péči i profesionální použití
- + průvodce výběrem nejvhodnějšího přístroje pro Vaše potřeby
- + mapa aplikačních bodů na těle

# OBSAH

Magnetoterapie jako léčebná metoda	4
Značka Renaissance	6
Průvodce pro výběr nejvhodnějšího magnetoterapeutického přístroje pro Vaše potřeby	10
Generátor DUO FORTE	20
Generátor DUO COMFORD	22
Aplikátor MANIC	24
Aplikátor PIANO	27
Aplikátor LETTINO	30
Aplikátor CASSO	33
Aplikátor CAVO	36
Aplikátor VIERA	41
Sada PRIMO C	44

Sada PRIMO M	<b>47</b>
Sada ANELLI	<b>50</b>
Sada ABOLITO	<b>53</b>
Sada MELIO	<b>56</b>
Sada MEDICO	<b>59</b>
Sada LETTINO	<b>62</b>
Sada VIVA	<b>65</b>
Sada VIVA PLUS	<b>68</b>
Sada SIECCO	<b>71</b>
Sada VIERA	<b>74</b>
Kdy nesmí být magnetoterapie použita	<b>77</b>
Aplikační body pro použití magnetoterapie	<b>78</b>
Kontaktní informace	<b>81</b>

# MAGNETOTERAPIE JAKO LÉČEBNÁ METODA

Na základě vědeckých výzkumů i zkušeností společnosti ZES Brno, a. s. s přístroji Renaissance lze hlavní význam pulzní magnetoterapie shrnout do následujících základních léčebných efektů:

<b>působí proti bolesti</b>	analgetický efekt
<b>uvolňuje svalové napětí</b>	myorelaxační efekt
<b>rozšiřuje cévy a stabilizuje krevní tlak</b>	vasodilatační efekt
<b>odstraňuje otoky</b>	protizánětlivý a protirevmatický efekt
<b>stimuluje růst a výstavbu kostní tkáně</b>	stimulační efekt
<b>odbourává škodliviny a urychluje látkovou výměnu</b>	detoxikační efekt
<b>regeneruje buňky a zlepšuje prokrvení</b>	regenerační efekt
<b>urychluje proces hojení</b>	hojivý efekt
<b>posiluje imunitu</b>	imunitní efekt

Magnetismus, vyvolaný pulzním nízkofrekvenčním magnetickým polem, vytváří **účinnou alternativu současné nadužívané farmakologické léčby**. Jednou z největších předností léčby magnetem je její přirozený charakter, při kterém **nedochází k vytvoření návyku**, jak tomu naopak často bývá při farmakologické léčbě.

Vedle již zmíněných účinků je magnetoterapie i při domácím použití mimořádně účinná při léčbě **otoku** (edému). Magnetické pole rovněž rozšiřuje drobné cévy a zlepšuje prokrvení, čehož se využívá například při zmírnění následků **cukrovky**. Mimořádně účinná je magnetoterapie při léčbě **migrén** nebo **ušního šelestu** (tinnitu). Uplatní se i v léčebném procesu některých psychických poruch (například spánkových) nebo autoimunitních

chorob (**Bechtěrevova choroba, revmatismus**). Klienti značky Renaissance používají své speciálně sestavené magnetoterapeutické sety také při **parodontóze, artrózách i artritidách, pooperační rekonvalescenci**, v procesu **hojení ran**, při **ischiasu** a při dalších **obtížích pohybového aparátu**. Jednoznačným nástrojem je také v boji proti moderním civilizačním chorobám.

Magnetoterapie není metodou určenou pouze pro starší nebo nemocný organismus. Sportovci znají magnetoterapii Renaissance z rehabilitačních procesů a využívají ji i pro relaxaci po namáhavém výkonu.

Pulzní magnetoterapie se stává v posledním desetiletí velmi populární alternativní léčebnou metodou. V současné době je léčba magnetickým polem – magnetoterapie, v odborných kruzích pokládána za **bezpečnou a velmi účinnou fyzikální léčebnou metodu**. Často bývá také nazývána "léčebnou metodou jednadvacátého století". Nejedná se ovšem o používání jednoduchých statických magnetů (náramků, bandáží nebo řetízků), ale o použití vysoce účinné léčby nízkofrekvenčním pulzním magnetickým polem.

Hojivá a regenerační síla elektromagnetické energie byla donedávna využívána především v klinické praxi v nemocnicích a profesionálních rehabilitačních zařízeních. Dnes je i díky mnohaletým zkušenostem, práci a vývoji ve společnosti ZES Brno, a. s. pulzní magnetoterapie dostupná také v domácí péči.



Pulzní magnetoterapie se s úspěchem používá v oborech jakými jsou **ortopedie, sportovní medicína, balneologie, rehabilitace, pediatrie, geriatric, dermatologie, neurologie, stomatologie, urologie, interna** ale i ve **veterinární medicíně**.



## ZNAČKA RENAISSANCE

Výrobě regeneračních a léčebných magnetoterapeutických kompletů řady Renaissance předcházela dlouhý a náročný vývoj. Výsledkem je magnetoterapie, která obstojí nejen **v profesionálním nasazení**, ale je i dostatečně účinná a přitom jednoduchá na obsluhu při **samoléčbě a domácí aplikaci**.

Výhodou systému Renaissance je, že byl původně určen pro nemocniční a klinické použití. Odtud pochází i jeho **odolnost, vysoká kvalita** použitých materiálů a možnost opakovaného, intenzivního nasazení. K domácímu užívání jej pak předurčuje **přehledná a snadná obsluha**, bezpečnostní nastavení a **velký rozsah možností využití**.

Značka Renaissance využívá vlastního generátoru kombinovaného s širokou řadou aplikátorů, vhodných pro konkrétní potřeby zákazníka. Generátor magnetických pulzů Renaissance je optimalizován na vytváření nejvhodnějšího rozpětí frekvence, samozřejmostí je možnost její regulace spolu s dobou aplikace. Aplikátory pak umožňují „exponovat“ léčivé magnetické pole přesně do míst potřeby. Aplikátory Renaissance lze použít od bodového lokálního účinku přes celoplošné, lůžkové aplikace až po „hloubkové“ kruhové aplikátory.

Důkazem úspěchů magnetoterapie Renaissance je opakované pořizování dalších aplikátorů u stávajících zákazníků i rychlé rozšiřování prodeje těchto užitečných pomocníků pro zdraví v Evropě i v zámoří.

Nejnovější léčebné komplety pro nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii řady Renaissance jsou **moderní certifikované zdravotnické přístroje** určené do domácího použití i fyzioterapeutické praxe. Svou technologickou vyspělostí, vysokou účinností, jednoduchostí ovládání a ergonomickým designem splňují ty nejnáročnější požadavky současné medicíny.

# HLAVNÍ DŮVODY, PROČ SI VYBRAT MAGNETOTERAPEUTICKÉ PŘÍSTROJE RENAISSANCE



## Prodloužená záruka na přístroje

Jsme si jistí kvalitou našich přístrojů, proto **poskytujeme prodlouženou záruku** na hlavní ovládací jednotku přístroje. **Magnetoterapeutické přístroje řady Renaissance splňují veškeré normy pro zdravotní prostředky.** Jejich parametry a správná funkčnost jsou pravidelně kontrolovány.



## Garance doživotní péče

Všem zákazníkům nabízíme vlastní **odborný technický servis po celou dobu používání přístroje.** Poskytujeme rovněž **bezplatné poradenství**, které můžete využít kdykoliv dle potřeby, včetně možnosti konzultace Vašeho dotazu s odborným lékařem.



## Značka kvality

Nejlepším potvrzením kvality jsou reálné výsledky, které v našem případě dosvědčuje velké **množství kladných referencí** od našich spokojených zákazníků. Držíme přední příčky nejen v počtu, ale především kvalitě a spolehlivosti magnetoterapeutických přístrojů. Výrobky řady Renaissance mají díky své vysoké a **certifikované kvalitě** své nezastupitelné místo na českém trhu, ve Slovenské republice i na dalších evropských a mezinárodních světových trzích.



## Tradice od roku 1995: výroba, výzkum a vývoj

**Hospodaříme ve vlastních výrobních, administrativních a skladových prostorách**, na ploše více než čtrnácti hektarů v průmyslové zóně Brno jih. Kompletní výrobě přístrojů řady Renaissance, ale i neustálému vývoji a výzkumu se ve společnosti ZES Brno, a. s. věnujeme již od roku 1995. Naše společnost je připravena pokrýt potřeby zákazníků nejen množstvím přístrojů, ale také komplexní konzultací a poradenstvím v oblasti použití a aplikace magnetoterapie. Můžete nám plně důvěřovat.



## Český výrobek

Veškerá výroba přístrojů Renaissance probíhá v České republice, odkud se distribuují do celého světa. **Na území České republiky pulzní magnetoterapie Renaissance získala od doby svého vzniku již více než dvacet tisíc spokojených zákazníků.** Výrobce přístrojů ZES Brno, a. s. je od roku 2012 hrdým partnerem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, Ministerstva zdravotnictví České republiky.



## Ruční výroba

Aplikátory k magnetoterapeutickým přístrojům Renaissance jsou **ručně šité** v naší vlastní šicí dílně. Jsou konstruovány tak, aby vydržely častou a dlouhodobou zátěž. Mají lehce omyvatelný povrch. Kvalitu jejich provedení oceňují uživatelé i profesionálové z oblasti výroby.





## Do domácí péče i pro profesionály

Magnetoterapeutické léčebné přístroje Renaissance jsou dlouhodobě a každodenně používány **profesionály** v mnoha nemocnicích, nestátních zdravotnických zařízeních, rehabilitacích a specializovaných pracovištích. Při své práci je využívají lékaři, fyzioterapeuti, maséři i provozovatelé wellness a fitness. Současně je jejich používání hojně rozšířeno v rámci **domácí péče**, kde slouží množství jednotlivců i celým rodinám při léčbě mnoha zdravotních problémů, při rekonvalescenci, regeneraci i prevenci. Přístroje Renaissance jsou pro své účinky vyhledávány také **sportovci**. Úspěšně je lze využít i při léčbě **zvířat**.



## Výrobek pro celou rodinu

Magnetoterapeutické přístroje Renaissance mají **široké uplatnění v domácnostech**. Lze je využít jako součást léčby u mnoha zdravotních problémů, ke zlepšení pohyblivosti, k úlevě od bolesti, ke zvýšení kondice, na posílení imunity, urychlení a zlepšení regenerace, relaxaci, nebo jako prostředek prevence. **Magnetoterapii mohou využívat děti, dospívající, dospělí i senioři**. Účinků magnetoterapie může využít i Váš **domácí mazlíček**.



## Jednoduchá obsluha

**Zapojení a ovládání magnetoterapeutických přístrojů Renaissance zvládne skutečně každý**. K přístrojům dodáváme přehledný návod a dokumentaci. V případě potřeby Vám s čímkoliv poradíme a pomůžeme, nebo Vám vše prakticky předvedeme osobně.

# PRŮVODCE VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍHO MAGNETOTERAPEUTICKÉHO PŘÍSTROJE PRO VAŠE POTŘEBY

Každý magnetoterapeutický přístroj se skládá s generátoru pulzů a aplikátoru nebo kombinace aplikátorů.

**Generátor pulzů** slouží jako řídicí jednotka, na které si nastavíte požadovaný léčebný program. **Aplikátor**, připojený ke generátoru pak přiložíte na potřebné místo na těle a necháte magnetoterapii působit. Ukončení aplikace přístroj automaticky zvukově signalizuje. Veškeré ovládání magnetoterapeutického přístroje Renaissance je snadné a přehledné.



*Aplikátor*



*Generátor*

Seznam generátorů a aplikátorů z naší nabídky najdete na stranách 20–43 tohoto katalogu.

**Aplikátory vybírejte podle bolestivých a postižených částí těla, na které potřebujete působit, nebo podle doporučení pro konkrétní nemoci a zdravotní problémy.**

Orientovat se můžete podle následující tabulky:

Diagnózy	Doporučený aplikátor	Kde aplikovat
<b>Abscesy Bartholiniho žláz</b>	malý plochý (MANIC)	oblast podbřišku
<b>Alergická rýma</b>	malý kruh (CAVO)	hlava, krční páteř
<b>Alzheimerova choroba</b>	malý kruh (CAVO) a velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	hlava, krční páteř
<b>Amputační pahýly</b>	malý kruh (CAVO)	postižené místo
<b>Angina pectoris, ICHS</b>	malý kruh (CAVO) a plochý (MANIC, PIANO, LETTINO, CASSO)	hrudník zepředu i zezadu
<b>Angína, nosohltan</b>	malý kruh (CAVO)	krk
<b>Artritida při lupénc</b>	malý kruh (CAVO)	postižené místo
<b>Artróza kloubů</b>	malý kruh (CAVO)	postižené místo
<b>Artróza kolene</b>	malý kruh (CAVO)	oblast kolene
<b>Artróza kyčle</b>	malý kruh (CAVO) nebo velký kruh (VIERA)	oblast kyčle
<b>Arytmie</b>	malý plochý (MANIC)	oblast hrudi
<b>Aseptické nekrózy kostí</b>	malý kruh (CAVO)	postižené místo
<b>Astma (bronchiální astma)</b>	malý kruh (CAVO) nebo malý plochý (MANIC)	oblast brzlíku
<b>Atopické ekzémy</b>	malý plochý (MANIC)	postižené místo + segment páteře, odkud vychází inervace
<b>Atrofie optického nervu</b>	malý kruh (CAVO)	oblast hlavy
<b>Bechtěrevova nemoc</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	oblast páteře
<b>Bércové vředy</b>	plochý (MANIC, PIANO, LETTINO, CASSO) nebo malý kruh (CAVO)	postižené místo

Diagnózy	Doporučený aplikátor	Kde aplikovat
<b>Bolesti zad a páteře</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	oblast páteře
<b>Brnění v končetinách (parestézie)</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO) a kruh (CAVO, VIERA)	postižená oblast a krční či bederní páteř
<b>Bronchitida</b>	malý kruh (CAVO) nebo malý plochý (MANIC)	oblast brzlíku
<b>Celulitida</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	postižené místo
<b>Degenerace míchy</b>	malý plochý (MANIC)	oblast míchy
<b>Degenerativní onemocnění sítnice</b>	malý kruh (CAVO)	oblast hlavy
<b>Detoxikační program</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO), kruh (CAVO, VIERA)	celotělově
<b>Dětská mozková obrna</b>	malý kruh (CAVO) a velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	oblast hlavy a páteře
<b>Diabetes</b>	malý plochý (MANIC)	oblast slinivky a jater
<b>Diabetická noha - prokrvení, brnění</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	postižené místo
<b>Dna</b>	malý kruh (CAVO)	postižené místo
<b>Dupuytrenova kontraktura</b>	malý plochý (MANIC)	oblast dlaně
<b>Endometrióza</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO) a malý plochý (MANIC)	oblast beder a podbřišku
<b>Endoprotézy</b>	malý kruh (CAVO) nebo velký kruh (VIERA)	oblast kloubu
<b>Erekce (poruchy sexuálních funkcí)</b>	malý plochý (MANIC) nebo kruh (CAVO, VIERA)	oblast pohlavních orgánů

Diagnózy	Doporučený aplikátor	Kde aplikovat
<b>Eroze čípku</b>	malý plochý (MANIC)	oblast podbřišku
<b>Glaukom</b>	malý kruh (CAVO)	oblast hlavy
<b>Gynekologické operace</b>	malý plochý (MANIC)	oblast podbřišku
<b>Hemoroidy (hemeroidy)</b>	malý plochý (MANIC)	oblast konečníku
<b>Hrtan, hlasivky, chrapot</b>	malý kruh (CAVO)	krk
<b>Hypotyreóza</b>	malý kruh (CAVO)	oblast hrtanu
<b>Imunita - posílení</b>	malý kruh (CAVO)	oblast brzlíku
<b>Ischias</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	oblast páteře
<b>Játra - po žloutence, toxické poškození</b>	malý plochý (MANIC)	oblast jater
<b>Karpální tunel</b>	malý plochý (MANIC) a kruh (CAVO, VIERA)	oblast zápěstí a krční páteř
<b>Klimakterické potíže</b>	malý plochý (MANIC)	oblast podbřišku
<b>Klíšťová encefalitida</b>	malý kruh (CAVO) a velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	oblast hlavy a páteře
<b>Kojení a zástava tvorby mléka</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO) nebo malý plochý (MANIC)	oblast hrudi
<b>Krční páteř - blokace</b>	malý kruh (CAVO)	krční páteř
<b>Křečové žíly - varixy</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	postižené místo
<b>Lehká mozková dysfunkce u dětí (LMD)</b>	malý kruh (CAVO)	oblast hlavy
<b>Lupénka</b>	malý plochý (MANIC) a kruh (CAVO, VIERA)	postižené místo

Diagnózy	Doporučený aplikátor	Kde aplikovat
<b>Lymfská borelióza</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO) a malý kruh (CAVO)	oblast páteře a hlavy
<b>Masáž</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	celé tělo
<b>Meniérův syndrom</b>	malý kruh (CAVO)	oblast hlavy
<b>Menstruace bolestivá, nepravidelná</b>	malý plochý (MANIC)	oblast podbřišku
<b>Migrény</b>	malý kruh (CAVO)	oblast hlavy
<b>Mononukleóza</b>	malý plochý (MANIC) a kruh (CAVO, VIERA)	oblast jater a krční páteře
<b>Mozková příhoda - následky</b>	malý kruh (CAVO)	oblast hlavy
<b>Myopatie</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	oblast páteře
<b>Nemoc kuřáků - CHOPN</b>	velký kruh (VIERA) nebo plochý (MANIC, PIANO, LETTINO, CASSO)	oblast hrudi
<b>Nepłodnost (poruchy reprodukční funkce)</b>	velký kruh (VIERA)	oblast beder a podbřišku
<b>Nespavost - poruchy spánku</b>	malý kruh (CAVO)	oblast hlavy
<b>Odontogenní osteomyelitidy</b>	velký kruh (VIERA) nebo malý kruh (CAVO)	postižené místo
<b>Onemocnění lymfatických cév</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	celé tělo
<b>Onemocnění tepen</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	celé tělo

Diagnózy	Doporučený aplikátor	Kde aplikovat
<b>Onemocnění žil</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO) nebo malý plochý (MANIC)	celé tělo
<b>Osteoporóza</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO) nebo kruh (CAVO, VIERA)	postižené místo
<b>Ostruhy</b>	malý plochý (MANIC)	oblast chodidla a paty
<b>Otoky</b>	plochý (MANIC, PIANO, LETTINO, CASSO) nebo kruh (CAVO, VIERA)	postižené místo
<b>Pálení žáhy, reflux</b>	malý plochý (MANIC) a kruh (CAVO, VIERA)	žaludek a hrudní páteř
<b>Paradentóza</b>	malý plochý (MANIC) nebo kruh (CAVO, VIERA)	oblast hlavy
<b>Parkinsonova nemoc, ztuhlost</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO) a malý kruh (CAVO)	oblast páteře a hlavy
<b>Pásový opar - herpes zoster</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	postižené místo
<b>Páteř - po operaci</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	oblast páteře
<b>Páteř - výrůstky</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	oblast páteře
<b>Plíce - nespecifická onemocnění</b>	velký kruh (VIERA)	oblast hrudi
<b>Po porodu, návrat dělohy</b>	velký kruh (VIERA)	oblast beder a podbřišku
<b>Pomočování u dětí</b>	malý plochý (MANIC)	oblast podbřišku

Diagnózy	Doporučený aplikátor	Kde aplikovat
<b>Pooperační stavy (hojení)</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO) nebo kruh (CAVO, VIERA)	postižené místo
<b>Popáleniny</b>	malý plochý (MANIC) nebo velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	postižené místo
<b>Poranění končetin</b>	malý kruh (CAVO)	postižené místo
<b>Postižení periferních nervů</b>	malý kruh (CAVO)	oblast hlavy
<b>Prostata - zánět, zvětšení</b>	velký kruh (VIERA) nebo plochý (MANIC, PIANO, LETTINO, CASSO)	oblast podbřišku
<b>Ragády bradavek</b>	malý plochý (MANIC) nebo velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	oblast bradavek
<b>Revmatoidní artritida</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	oblast páteře
<b>Rohovka - úraz, operace, infekce oka</b>	malý kruh (CAVO)	oblast hlavy
<b>Roztroušená skleróza</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO) a malý kruh (CAVO)	oblast páteře a hlavy
<b>Sinusitidy - záněty dutin</b>	malý kruh (CAVO)	oblast hlavy
<b>Sklerodermie - neurologické komplikace</b>	malý kruh (CAVO)	oblast hlavy
<b>Tenisový loket</b>	malý kruh (CAVO) nebo plochý (MANIC, PIANO, LETTINO, CASSO)	oblast lokte
<b>Tinnitus</b>	malý kruh (CAVO)	oblast hlavy



Diagnózy	Doporučený aplikátor	Kde aplikovat
<b>Tuberkulóza plic (chronická)</b>	velký kruh (VIERA)	oblast hrudi
<b>Ulcerózní kolitida</b>	velký kruh (VIERA)	oblast břicha, beder a hýždí
<b>Úrazy míchy</b>	malý plochý (MANIC)	oblast míchy
<b>Ústřel, lumbago ("houser")</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	oblast páteře
<b>Uvolnění svalů - myorelaxace</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	postižené místo
<b>Výhřez ploténky</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	oblast páteře
<b>Vysoký tlak (hypertenze)</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO)	oblast hrudi
<b>Zácpa</b>	velký plochý (PIANO, LETTINO, CASSO) a malý plochý (MANIC)	oblast břicha
<b>Zánět dělohy a sliznice</b>	malý plochý (MANIC)	oblast podbřišku
<b>Zánět kostní dřene (osteomyelitida)</b>	malý kruh (CAVO)	postižené místo
<b>Zánět ledvin, kolika</b>	velký kruh (VIERA)	oblast beder
<b>Zánět míšních kořenů (polyradikuloneuritidy)</b>	malý plochý (MANIC)	oblast míchy
<b>Zánět močových cest</b>	malý plochý (MANIC)	oblast podbřišku
<b>Zánět pochvy, výtok</b>	malý plochý (MANIC)	oblast podbřišku
<b>Zánět slinivky (akutní)</b>	velký kruh (VIERA)	přechod hrudní a bederní páteře
<b>Zánět slinivky (chronický)</b>	velký kruh (VIERA)	přechod hrudní a bederní páteře

Diagnózy	Doporučený aplikátor	Kde aplikovat
<b>Zánět středního ucha</b>	malý kruh (CAVO)	oblast hlavy
<b>Zánět tlustého střeva, Crohnova choroba</b>	velký kruh (VIERA) nebo plochý (MANIC, PIANO, LETTINO, CASSO)	oblast břicha
<b>Zánět vaječníků a vejcovodů</b>	malý plochý (MANIC)	oblast podbřišku
<b>Zlomeniny</b>	malý kruh (CAVO) nebo plochý (MANIC, PIANO, LETTINO, CASSO)	postižené místo
<b>Zlomeniny - komplikované hojení</b>	malý kruh (CAVO) nebo velký kruh (VIERA)	postižené místo
<b>Zmrzlá ramena</b>	malý kruh (CAVO)	oblast ramene
<b>Žaludeční vředy</b>	velký kruh (VIERA)	oblast žaludku



### MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz)  
nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)

# DOPORUČENÍ K POUŽITÍ APLIKÁTORŮ



Při použití aplikátoru na páteř mějte na paměti, že **páteř funguje vždy jako celek**. Přestože máte problémy například v bederní oblasti, je zapotřebí ošetřit celou páteř.

**Při bolestech aplikujeme magnetoterapii na bolestivé místo na těle a současně také na oblast páteře, odkud do daného místa vychází inervace** (inervace = zásobování části těla nervovými vlákny prostřednictvím určitého nervu). Dle tohoto doporučení tedy při aplikaci na ruce aplikujte současně na krční páteř a při aplikaci na nohy aplikujte rovněž na bederní páteř.

**Nejlepších a nejrychlejších výsledků dosáhnete vždy celotělovou aplikací.**

Na klouby a krční páteř je ideální volbou kruhový aplikátor, jehož stejnosměrné pole pronikne celou tloušťkou tkáně.

Na stránkách s podrobnými informacemi o jednotlivých aplikátorech najdete fotografie s praktickými ukázkami možnosti jejich použití. Pro lepší představu o možnostech použití konkrétních aplikátorů si můžete prohlédnout mapu aplikačních bodů na stránce 78.

Při výběru vhodného aplikátoru pro Vaše potřeby se můžete orientovat také podle **piktogramů** (grafických znaků), které jsou zobrazeny v popisu u každého aplikátoru. Tyto piktogramy naznačují oblast těla, na kterou aplikátor můžete použít.



# GENERÁTOR DUO FORTE



## **Popis generátoru DUO FORTE, vhodnost použití:**

Generátor DUO FORTE je nejmodernější typ generátoru s několika desítkami speciálních programů. Každé onemocnění má svůj vlastní program kombinující různé frekvence a tvary pulzů. Protože například artróza postihuje nejen kloubní chrupavku, ale také kost pod ní (výrůstky, změny na kosti) i kloubní pouzdro, je program navržen tak, aby co nejlépe ovlivnil buňky všech těchto tkání. Tím je dosaženo lepšího léčebného efektu a rychlejší úlevy od bolesti.

Na generátoru lze navolit intenzitu a délku aplikace a zvolit jiný program pro každý aplikátor. Často používané programy lze uložit do složky „Oblíbené“ a následně snadněji spustit i s příslušným nastavením délky aplikace a intenzity magnetického pole.

### Parametry generátoru DUO FORTE:

- několik desítek speciálních programů
- analgetické programy
- regenerační programy
- dva nezávislé výstupní kanály, umožňuje spustit současně dvě rozdílné procedury
- regulovaná optimální frekvence (v rozmezí 1–100 Hz)
- snadné ovládání
- ergonomický design



#### MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz)  
nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)

# GENERÁTOR DUO COMFORD



## **Popis generátoru DUO COMFORD, vhodnost použití:**

Generátor DUO COMFORD je standardní typ generátoru s jedním univerzálním regeneračním programem a deseti speciálními programy, včetně programů analgetických (proti bolesti). Tyto programy pracují s frekvencemi 1–72 Hz, čímž pokrývají neoptimálnější spektrum vhodné k léčbě nejrůznějších chorob ovlivnitelných pulzní magnetoterapií. Tvar pulzu je nastaven tak, aby v buňkách lidského těla vyvolal okamžitou pozitivní odpověď.

## Parametry generátoru DUO COMFORT:

- jednoduchý grafický displej
- 10 speciálních programů včetně analgetických
- univerzální regenerační program
- dva výstupní kanály umožňující připojit dva aplikátory
- regulovaná optimální frekvence (v rozmezí 1–72 Hz)
- snadné ovládání
- ergonomický design



**MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!**

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz)  
nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)



# APLIKÁTOR MANIC



## Parametry aplikátoru MANIC:

- deskový tvar
- hmotnost 455 g
- rozměr 170 × 210 mm

## Oblasti těla, na které aplikátor MANIC využijete nejlépe:

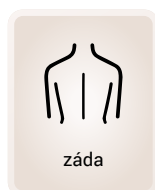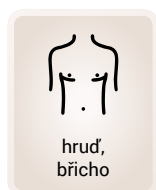




## Popis aplikátoru MANIC, vhodnost použití:


Malý aplikátor určený k cílené aplikaci, například: uši, zuby, krční páteř, menší klouby, regenerace vnitřních orgánů (játra, žaludek, děloha, prostata atd.).

*Další informace k možnostem použití aplikátoru MANIC najdete na straně 47 v popisu sady PRIMO M*

## Ukázky použití aplikátoru MANIC:

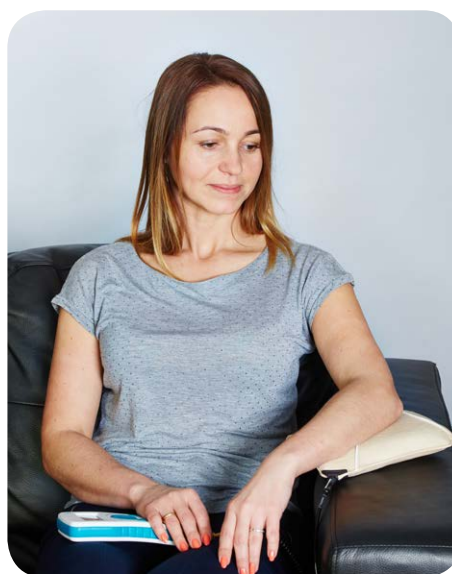

## Ukázky použití Aplikátoru MANIC:

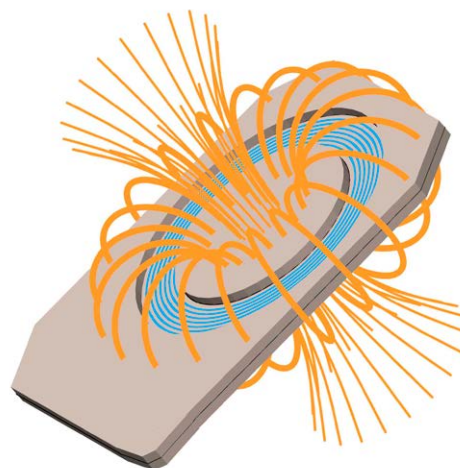

*Průběh siločar magnetického pole aplikátoru MANIC*



**MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!**

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz)  
nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)



# APLIKÁTOR PIANO



## Parametry aplikátoru PIANO:

- deskový tvar
- hmotnost 860 g
- rozměr 460 × 490 mm

## Oblasti těla, na které aplikátor PIANO využijete nejlépe:

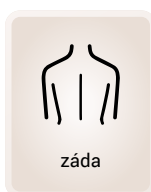
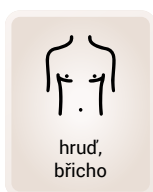


### **Popis aplikátoru PIANO, vhodnost použití:**

Aplikátor určený k použití zejména na oblast zad, lze však dobře použít i při terapii orgánů uložených v dutině hrudní a břišní. Můžeme aplikovat také na končetiny a velké klouby.

### **Ukázky použití aplikátoru PIANO:**



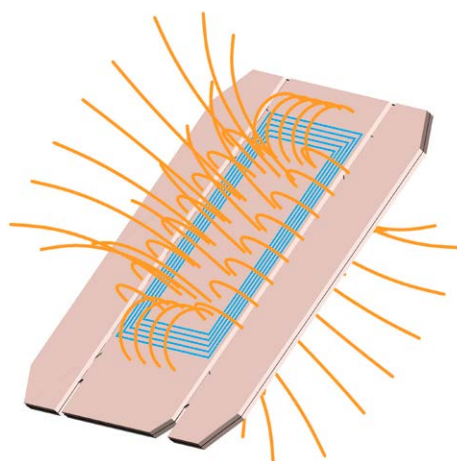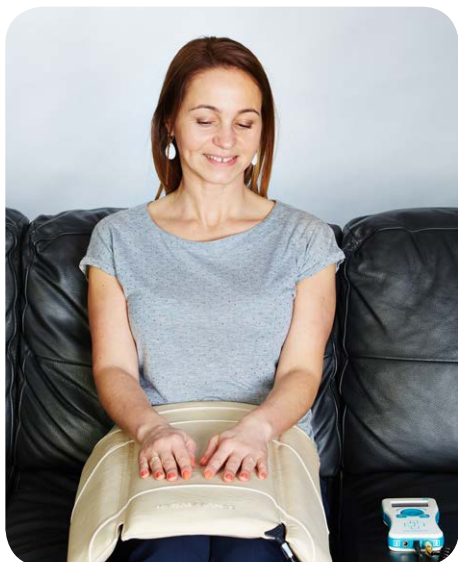

*Průběh siločar magnetického pole aplikátoru PIANO*



**MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!**

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz)  
nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)



# APLIKÁTOR LETTINO



## Parametry aplikátoru LETTINO:

- deskový tvar, 4dílný
- hmotnost 2 275 g
- rozměr 310 × 1 010 mm

## Oblasti těla, na které aplikátor LETTINO využijete nejlépe:

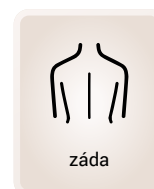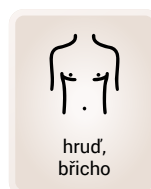


## Popis aplikátoru LETTINO, vhodnost použití:

Aplikátor typu "lůžko" střední velikosti. Vhodný k aplikaci na celou oblast páteře včetně hýždí a hlavy. Výborně se uplatní také v terapii onemocnění dolních končetin (zejména při diabetu) a jejich kloubů.

## Ukázky použití aplikátoru LETTINO:



## Ukázky použití aplikátoru LETTINO:

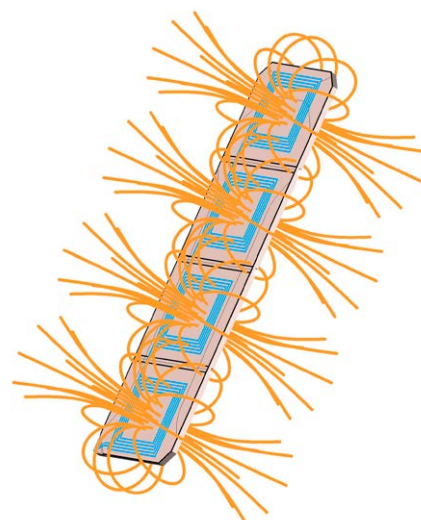

Průběh siločar magnetického pole aplikátoru LETTINO



**MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!**

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz)  
nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)



# APLIKÁTOR CASSO



## Parametry aplikátoru CASSO:

- deskový tvar, 5dílný
- hmotnost 5 980 g
- rozměr 550 × 1 730 mm

## Oblasti těla, na které aplikátor CASSO využijete nejlépe:




## Popis aplikátoru CASSO, vhodnost použití:

Největší z aplikátorů typu "lůžko", určený k celotělové regeneraci.

## Ukázky použití aplikátoru CASSO:



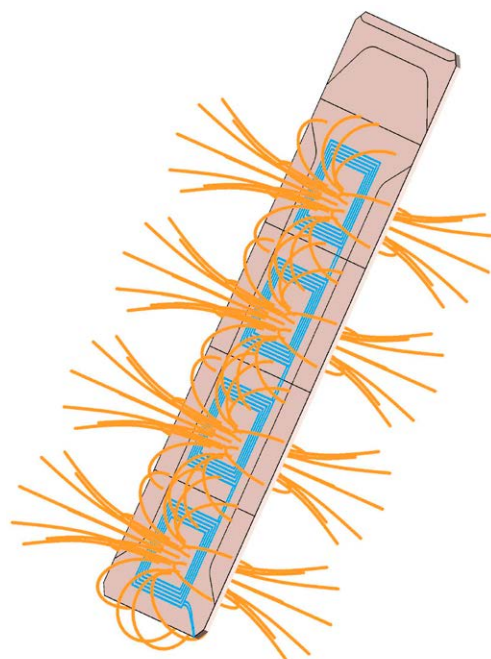

*Průběh siločar magnetického pole aplikátoru CASSO*



**MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!**

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz)  
nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)




# APLIKÁTOR CAVO



## Parametry aplikátoru CAVO:

- kruhový tvar
- hmotnost 1 330 g
- průměr 260 mm

## Oblasti těla, na které aplikátor CAVO využijete nejlépe:

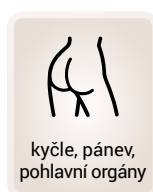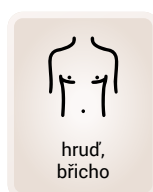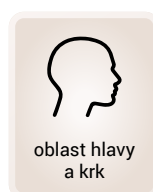

## Popis aplikátoru CAVO, vhodnost použití:

Nejvhodnější aplikátor k léčbě onemocnění kloubů, krční páteře, bolestí hlavy, zubů, hučení v uších, některých neurologických obtížích atd. Díky homogennímu magnetickému poli v duté cívce se regeneruje celá tloušťka tkáně v místě aplikace.

*Další informace k možnostem použití Aplikátoru CAVO najdete na straně 44 s popisem sady PRIMO C*

## Ukázky použití aplikátoru CAVO:




Ukázky použití aplikátoru CAVO:



Ukázky použití aplikátoru CAVO:



## Ukázky použití aplikátoru CAVO:

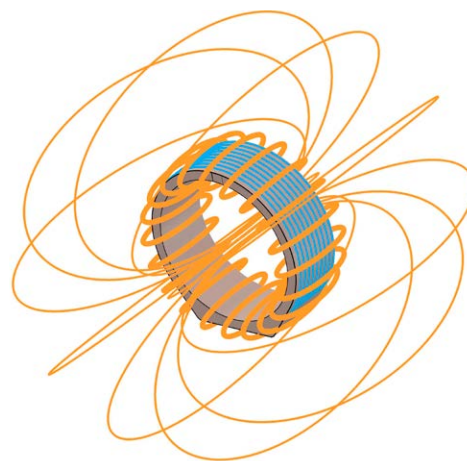

*Průběh siločar magnetického pole aplikátoru CAVO*



**MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!**

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz)  
nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)





# APLIKÁTOR VIERA



## Parametry aplikátoru VIERA:

- kruhový tvar
- hmotnost 9,2 kg
- průměr 650 mm

## Oblasti těla, na které aplikátor VIERA využijete nejlépe:

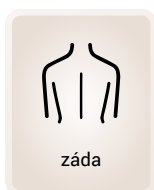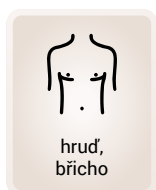


## **Popis aplikátoru VIERA, vhodnost použití:**

Aplikátor VIERA je velký kruhový aplikátor o průměru 65 cm, určený zejména do profesionálních lázeňských a rehabilitačních zařízení, do ordinací fyzioterapeutů a v neposlední řadě také do domovů a stacionářů pro seniory či tělesně postižené, které svým klientům poskytují zdravotní péči. Tento aplikátor svými rozměry umožňuje umístit pacienta dovnitř homogenního (stejnoměrného) pulzního magnetického pole, které rovnoměrně prostoupí celou tloušťku ošetřované tkáně. Jeho regenerační, protibolestivé a protizánětlivé účinky se tak mohou naplno projevit například u artrózy kolenních a kyčelních kloubů, revmatoidní artritidy, bolestí zad nejrůznějšího původu, osteoporózy a mnoha dalších onemocnění. Zvláště u osteoporózy, která se nejrizikověji projevuje řídnutím kostní tkáně v oblasti krčků kyčelních kloubů a bederních obratlů, je použití pulzní magnetoterapie prostřednictvím tohoto aplikátoru velmi důležité.

## **Ukázka použití aplikátoru VIERA:**



## Ukázky použití aplikátoru VIERA:

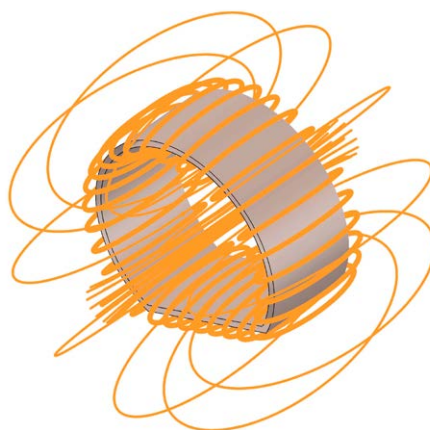

*Průběh siločar magnetického pole aplikátoru VIERA*

*i*

**MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!**

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz)  
nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)


# SADA PRIMO C



## Sada PRIMO C obsahuje:

- kruhový aplikátor CAVO, průměr 260 mm
- dvojitý generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORT dle výběru
- napájecí zdroj
- tester magnetického pole
- návod k použití, informačního a obrazového průvodce
- kvalitní obal pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

## Oblasti těla, na které sadu PRIMO C využijete nejlépe:

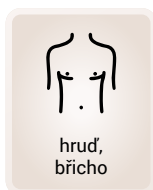

## Popis sady PRIMO C, vhodnost použití:

Aplikátor CAVO, který obsahuje tato souprava, je kruhový aplikátor o průměru 26 cm. Generuje homogenní magnetické pole, jehož účinný dosah je zhruba 30–40 cm na každou stranu od aplikátoru ve směru podélné osy procházející jeho středem. Použijeme-li ho tedy například k léčbě bolestí či poruch funkce krční páteře, zároveň budeme také regenerovat její hrudní část, dýchací cesty a brzlík (imunita) a směrem vzhůru zase celou oblast hlavy (migrény, časté bolesti), ústní dutinu (bolesti zubů, paradentóza, záněty), horní cesty dýchací a paranasální dutiny a také oči (glaukom, záněty spojivek) a uši (hučení v uších, záněty středního ucha).

Souprava PRIMO C je také díky aplikátoru CAVO velmi vhodná k řešení mnoha dysfunkcí pohybového aparátu, zejména kloubů. Jak již bylo popsáno výše, generuje aplikátor CAVO homogenní magnetické pole, které rovnoměrně proniká celou tloušťkou tkáně a proto jeho regenerační, protizánětlivé a protibolestivé působení plně obsáhne vazivovou, chrupavčitou i kostní složku ošetřovaného kloubu.

## Aplikátor v sadě PRIMO C:



### Kruhový aplikátor CAVO

- průměr 260 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru CAVO najdete na straně 36*

## Výběr generátoru:

K sadě PRIMO C si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídicích jednotek

### Varianta PRIMO C FORTE

- s generátorem DUO FORTE



*Podrobnější informace o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20*

### Varianta PRIMO C

- s generátorem DUO COMFORD



*Podrobnější informace o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22*



### MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz)  
nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)


# SADA PRIMO M



## Sada PRIMO M obsahuje:

- deskový aplikátor MANIC, rozměr 170 × 210 mm
- dvojitý generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORT dle výběru
- napájecí zdroj
- tester magnetického pole
- návod k použití, informačního a obrazového průvodce
- kvalitní obal pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

## Oblasti těla, na které sadu PRIMO M využijete nejlépe:

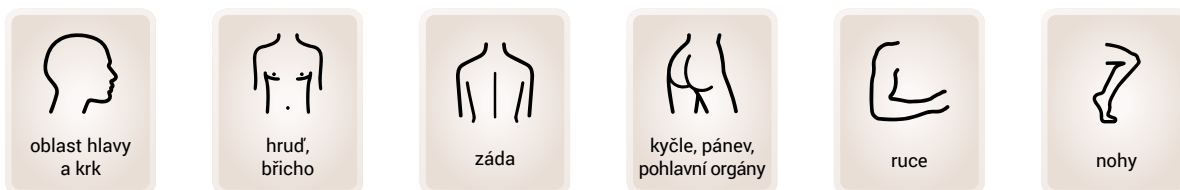

## Popis sady PRIMO M, vhodnost použití:

Souprava PRIMO M obsahuje jediný malý plochý aplikátor MANIC. Navzdory tomu, že se to může zdát málo, má tento léčebný komplet překvapivě široké možnosti použití.

Aplikátor MANIC je svou velikostí předurčen k intenzivní cílené terapii a regeneraci nejrůznějších orgánů a tkání. Lze jej s úspěchem použít například k odstranění bolestí krční páteře a k uvolnění okolních svalových spasmů, uplatní se při léčbě hučení v uších (tinnitus, Meniérova choroba) či zánětu středouší, dobře účinkuje při bolestech zubů a paradentóze. Vzhledem k tomu, že aplikátor MANIC díky své velikosti generuje intenzivní magnetické pole, je velmi vhodný k tlumení nejrůznějších bolestí. Jeho analgetické a regenerační působení ocení nejen lidé s artrózou či revmatoidní artritidou kolenních a kyčelních kloubů, ale také ti, které trápí potíže s tenisovými lokty nebo syndrom karpálního tunelu.

Soupravu PRIMO M lze také dobře využít k léčbě hemeroidů a potíží s prostatou, k cílené regeneraci jater, žaludku (žaludeční vředy) a dalších vnitřních orgánů.

## Aplikátor v sadě PRIMO M:



### Deskový aplikátor MANIC

- rozměr 170 × 210 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru MANIC najdete na straně 24*



## Výběr generátoru:

K sadě PRIMO M si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídicích jednotek

### Varianta PRIMO M FORTE

- s generátorem DUO FORTE



*Podrobnější informace o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20*

### Varianta PRIMO M

- s generátorem DUO COMFORT



*Podrobnější informace o generátoru DUO COMFORT najdete na straně 22*



**MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!**

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz)  
nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)


# SADA ANELLI



## Sada ANELLI obsahuje:

- kruhový aplikátor CAVO, průměr 260 mm
- deskový aplikátor MANIC, rozměr 170 × 210 mm
- dvojjýstupový generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORT dle výběru
- napájecí zdroj
- tester magnetického pole
- návod k použití, informačního a obrazového průvodce
- kvalitní obal pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

## Oblasti těla, na které sadu ANELLI využijete nejlépe:

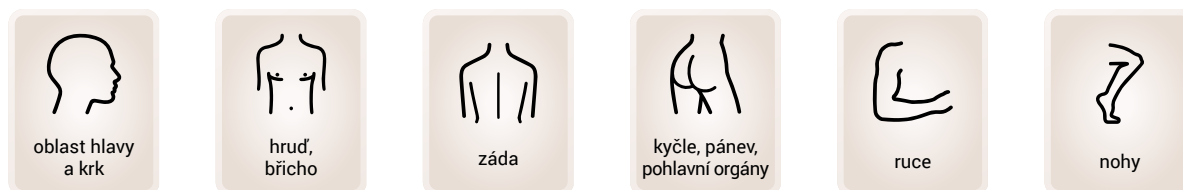

## Popis sady ANELLI, vhodnost použití:

Sada ANELLI je ideální volbou pro časté cestovatele, kteří chtějí mít pulzní magnetoterapii všude s sebou. Léčebný komplet ANELLI v sobě spojuje přednosti kruhového aplikátoru CAVO a malého plochého aplikátoru MANIC.

Aplikátor MANIC díky své velikosti generuje silné magnetické pole a je proto vhodný zejména k tlumení bolesti. Velice se osvědčil například při řešení syndromu karpálního tunelu. U tohoto onemocnění se bolesti zápěstí a brnění dlaně objevují hlavně v noci a jsou velmi úporné. Pravidelné používání pulzní magnetoterapie u této diagnózy může plně nahradit léčbu kortikoidy a odvrátit hrozbu nepříjemné operace. Malý aplikátor MANIC lze také s úspěchem použít při odstraňování potíží s takzvaným tenisovým loktem či syndromem „zmrzlého ramene“. Ocení ho také maminky, jejichž děti často trápí bolesti břicha ("baby kolika") či rostoucí zoubky.

Aplikátor CAVO vytváří homogenní magnetické pole, které rovnoměrně prochází celou tloušťkou ošetřované tkáně. Proto je velmi vhodný například k tlumení bolesti hlavy a krční páteře či k regeneraci kloubů postižených artrózou nebo revmatoidní artritidou.

## Aplikátory v sadě ANELLI:



### Kruhový aplikátor CAVO

- průměr 260 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru CAVO najdete na straně 36*



### Deskový aplikátor MANIC

- rozměr 170 × 210 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru MANIC najdete na straně 24*

## Výběr generátoru:

K sadě ANELLI si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídicích jednotek

### Varianta ANELLI FORTE

- s generátorem DUO FORTE



*Podrobnější informace o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20*

### Varianta ANELLI

- s generátorem DUO COMFORD



*Podrobnější informace o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22*



### MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz) nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)


# SADA ABOLITO



## Sada ABOLITO obsahuje:

- deskový aplikátor PIANO, rozměr 460 × 490 mm
- kruhový aplikátor CAVO, průměr 260 mm
- dvojitý generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORT dle výběru
- napájecí zdroj
- tester magnetického pole
- návod k použití, informačního a obrazového průvodce
- kvalitní tašku pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

## Oblasti těla, na které sadu ABOLITO využijete nejlépe:

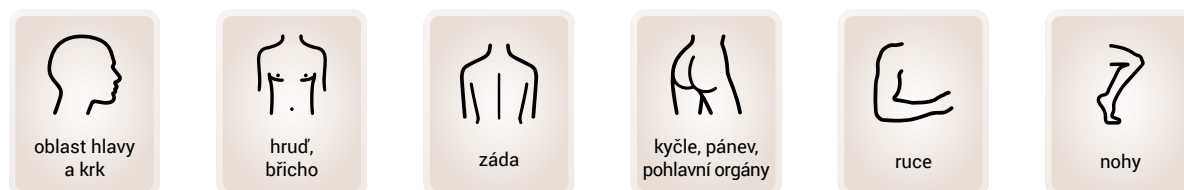

## Popis sady ABOLITO, vhodnost použití:

Léčebný komplet ABOLITO obsahuje kruhový aplikátor CAVO a velký plochý aplikátor PIANO.

Kruhový aplikátor CAVO generuje homogenní magnetické pole a je proto vhodný k regeneraci hluboko v těle uložených struktur. Uplatní se tedy například při léčbě osteoporózy kostí horních a dolních končetin (výrazně urychlí také hojení zlomenin), artrózy a revmatoidní artritidy. U těchto kloubních onemocnění je důležité rovnoměrné působení pulzního magnetického pole ve všech vrstvách tkáně, což kruhový aplikátor zajistí. Umožní tak regeneraci buněk vaziva i chrupavky, optimalizuje produkci kloubního mazu a odstraní případné otoky a zánětlivé komplikace. Svým působením pomáhá také odstraňovat migrény, léčí záněty horních cest dýchacích, tinnitus a bolesti krční páteře nejrůznějšího původu.

Plochý aplikátor PIANO je vhodný například k léčbě bolesti páteře a zad obecně, při ústřelech, posunech a výhřezech ploténky, ale uplatní se také při regeneraci orgánů uložených v dutině hrudní a břišní nebo při potížích s prokrvením končetin (zejména u diabetiků), či léčbě zánětů křečových žil.

## Aplikátory v sadě ABOLITO:



### Deskový aplikátor PIANO

- rozměr 460 × 490 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru PIANO najdete na straně 27*



### Kruhový aplikátor CAVO

- průměr 260 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru CAVO najdete na straně 36*

## Výběr generátoru:

K sadě ABOLITO si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídicích jednotek

### Varianta ABOLITO FORTE

- s generátorem  
DUO FORTE



*Podrobnější informace  
o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20*

### Varianta ABOLITO

- s generátorem  
DUO COMFORD



*Podrobnější informace  
o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22*



### MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz)  
nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)



# SADA MELIO



## Sada MELIO obsahuje:

- deskový aplikátor PIANO, rozměr 460 × 490 mm
- deskový aplikátor MANIC, rozměr 170 × 210 mm
- dvojitý generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORT dle výběru
- napájecí zdroj
- tester magnetického pole
- návod k použití, informačního a obrazového průvodce
- kvalitní tašku pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

## Oblasti těla, na které sadu MELIO využijete nejlépe:

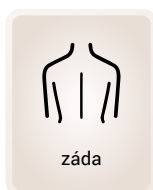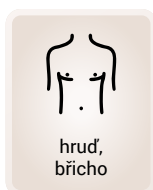



## Popis sady MELIO, vhodnost použití:

Magnetoterapeutická souprava MELIO se skládá z širokého zádového aplikátoru PIANO a malého plochého aplikátoru MANIC.

Aplikátor PIANO lze použít například k terapii bolestí zad a páteře ve všech jejích částech: křížové, bederní, hrudní i krční. Díky svým rozměrům obsáhne jeho působení i přilehlé svalstvo, jehož celková ztuhlost a lokální kontraktury často významně přispívají k vývoji bolestí. Aplikátor PIANO vyvolá vyšší prokrvení v exponované tkáni a tím dosáhne uvolnění svalových vláken a urychlí odplavení kyselých zplodin metabolismu. Výborně se hodí také k aplikaci na hrudník při angině pectoris a regeneraci srdeční svaloviny po infarktu, nebo na břicho při vředové chorobě žaludku a duodena, zánětlivých onemocněních slinivky a střev, zácpě a také při bolestivé menstruaci a řešení gynekologických potíží obecně.

Aplikátor MANIC je velmi vhodný k cílené aplikaci na místa, kde chceme dosáhnout intenzivního léčebného účinku. Můžeme ho tedy použít například k utišení bolesti kloubů, zubů, hučení v uších, vhodný je také při syndromu tenisového lokte a karpálního tunelu.

## Aplikátory v sadě MELIO:



### Deskový aplikátor PIANO

- rozměr 460 × 490 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru PIANO najdete na straně 27*



### Deskový aplikátor MANIC

- rozměr 170 × 210 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru MANIC najdete na straně 24*

## Výběr generátoru:

K sadě MELIO si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídicích jednotek

### Varianta MELIO FORTE

- s generátorem DUO FORTE



*Podrobnější informace o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20*

### Varianta MELIO

- s generátorem DUO COMFORD



*Podrobnější informace o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22*



### MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz)  
nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)


# SADA MEDICO



## Sada MEDICO obsahuje:

- deskový aplikátor PIANO, rozměr 460 × 490 mm
- kruhový aplikátor CAVO, průměr 260 mm
- deskový aplikátor MANIC, rozměr 170 × 210 mm
- dvojjýstupový generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORT dle výběru
- napájecí zdroj
- tester magnetického pole
- návod k použití, informačního a obrazového průvodce
- kvalitní tašku pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

## Oblasti těla, na které sadu MEDICO využijete nejlépe:

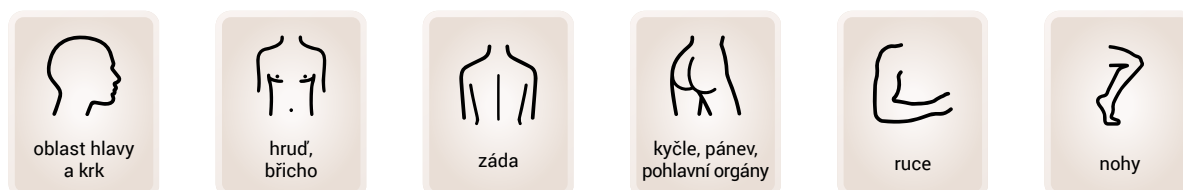

## Popis sady MEDICO, vhodnost použití:

Léčebný komplet MEDICO je kombinací kruhového aplikátoru CAVO, širokého zádového aplikátoru PIANO a malého plochého aplikátoru MANIC.

Aplikátor PIANO se velmi dobře hodí například k regeneraci a prokrvení tkání dolních končetin, ocení ho lidé s křečovými žilami, osteoporózou či cévními a neurologickými komplikacemi diabetu. Při aplikaci na oblast zad pomáhá nejen ulevit od bolestí páteře, ale také předcházet a léčit astmatické záchvaty (je vhodné ho přikládat i na hrudník).

Dýchací cesty však velmi dobře regeneruje také kruhový aplikátor CAVO, který při aplikaci na krční páteř díky velkému dosahu magnetického pole zasáhne i tuto oblast. Zároveň je nejvhodnějším aplikátorem pro léčbu veškerých kloubních onemocnění.

Malý aplikátor MANIC se uplatní při tlumení bolestí nebo při cílené aplikaci například na oblast hráze (prostata, hemeroidy) či orgánů uložených v dutině břišní a hrudní.

## Aplikátory v sadě MEDICO:



### Deskový aplikátor PIANO

- rozměr 460 × 490 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru PIANO najdete na straně 27*



### Kruhový aplikátor CAVO

- průměr 260 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru CAVO najdete na straně 36*



### Deskový aplikátor MANIC

- rozměr 170 × 210 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru MANIC najdete na straně 24*

## Výběr generátoru:

K sadě MEDICO si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídicích jednotek

### Varianta MEDICO FORTE

- s generátorem DUO FORTE



*Podrobnější informace o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20*

### Varianta MEDICO

- s generátorem DUO COMFORD



*Podrobnější informace o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22*



**MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!**

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz)  
nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)



# SADA LETTINO



## Sada LETTINO obsahuje:

- 4dílný aplikátor LETTINO, rozměr 310 × 1 010 mm
- deskový aplikátor MANIC, rozměr 170 × 210 mm
- dvojitý generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORT dle výběru
- napájecí zdroj
- tester magnetického pole
- návod k použití, informačního a obrazového průvodce
- kvalitní tašku pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

## Oblasti těla, na které sadu LETTINO využijete nejlépe:

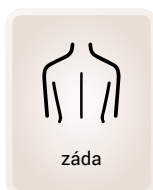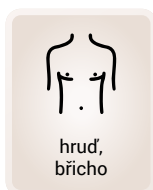

## Popis sady LETTINO, vhodnost použití:

Tato magnetoterapeutická souprava obsahuje lůžkový aplikátor střední velikosti LETTINO a malý plochý aplikátor MANIC.

Aplikátor LETTINO díky své velikosti obsáhne celou délku páteře včetně křížokyčelního skloubení a pánve. To je velmi důležité, neboť páteř pracuje jako celek a tak se dysfunkce křížokyčelního skloubení může paradoxně projevit jako bolest hlavy nebo problém s krční páteří. Aplikátor LETTINO regeneruje kostní, vazivovou i nervovou složku páteře v celém jejím průběhu a tím odstraňuje bolesti a pomáhá obnovovat její správnou funkci. Zároveň je možné použít ho k léčbě hemeroidů a problémů s prostatou, k odstranění zánětů a trombóz křečových žil a ke zlepšení prokrvení končetin.

Aplikátor MANIC je uzpůsoben k ošetření menších oblastí hlavy, trupu a končetin. Při aplikaci na krk je možné využít ho například ke zlepšení snížené činnosti štítné žlázy, v oblasti obličeje se uplatní v léčbě paradentózy a bolestí zubů či při poruchách sluchu. Velmi vhodný je k tlumení bolestí kloubů a své uplatnění najde jistě i u dětských pacientů.

## Aplikátory v sadě LETTINO:



### Deskový aplikátor LETTINO

- rozměr 310 × 1 010 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru LETTINO najdete na straně 30*



### Deskový aplikátor MANIC

- rozměr 170 × 210 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru MANIC najdete na straně 24*

## Výběr generátoru:

K sadě LETTINO si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídicích jednotek

### Varianta LETTINO FORTE

- s generátorem  
DUO FORTE



*Podrobnější informace  
o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20*

### Varianta LETTINO

- s generátorem  
DUO COMFORT



*Podrobnější informace  
o generátoru DUO COMFORT najdete na straně 22*



### MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz)  
nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)




# SADA VIVA



## Sada VIVA obsahuje:

- 4dílný aplikátor LETTINO, rozměr 310 × 1 010 mm
- kruhový aplikátor CAVO, průměr 260 mm
- dvojjýstupový generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORT dle výběru
- napájecí zdroj
- tester magnetického pole
- návod k použití, informačního a obrazového průvodce
- kvalitní tašku pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

## Oblasti těla, na které sadu VIVA využijete nejlépe:

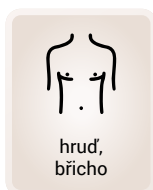

## Popis sady VIVA, vhodnost použití:

Sada VIVA obsahuje lůžkový aplikátor střední velikosti LETTINO a kruhový aplikátor CAVO.

Aplikátor LETTINO díky své velikosti obsáhne celou délku páteře včetně křížokyčelního skloubení a pánve. To je velmi důležité, neboť páteř pracuje jako celek a tak se dysfunkce křížokyčelního skloubení může paradoxně projevit jako bolest hlavy nebo problém s krční páteří. Aplikátor LETTINO regeneruje kostní, vazivovou i nervovou složku páteře v celém jejím průběhu a tím odstraňuje bolesti a pomáhá obnovovat její správnou funkci. Zároveň je možné použít ho k léčbě hemeroidů a problémů s prostatou, k odstranění zánětů a trombóz křečových žil a ke zlepšení prokrvení končetin.

Kruhový aplikátor CAVO generuje homogenní magnetické pole a je proto vhodný k regeneraci hluboko v těle uložených struktur. Uplatní se tedy například při léčbě osteoporózy kostí horních a dolních končetin (výrazně urychlí také hojení zlomenin), artrózy a revmatoidní artritidy. U těchto kloubních onemocnění je důležité rovnoměrné působení pulzního magnetického pole ve všech vrstvách tkáně, což kruhový aplikátor zajistí. Umožní tak regeneraci buněk vaziva i chrupavky, optimalizuje produkci kloubního mazu a odstraní případné otoky a zánětlivé komplikace. Svým harmonickým působením pomáhá také odstraňovat migrény, léčí záněty horních cest dýchacích, tinnitus a bolesti krční páteře nejrůznějšího původu.

## Aplikátory v sadě VIVA:



### Deskový aplikátor LETTINO

- rozměr 310 × 1 010 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru LETTINO najdete na straně 30*



### Kruhový aplikátor CAVO

- průměr 260 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru CAVO najdete na straně 36*

## Výběr generátoru:

K sadě VIVA si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídicích jednotek

### Varianta VIVA FORTE

- s generátorem DUO FORTE



*Podrobnější informace o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20*

### Varianta VIVA

- s generátorem DUO COMFORD



*Podrobnější informace o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22*



### MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz) nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)


# SADA VIVA PLUS



## Sada VIVA PLUS obsahuje:

- 4dílný aplikátor LETTINO, rozměr 310 × 1 010 mm
- kruhový aplikátor CAVO, průměr 260 mm
- deskový aplikátor MANIC, rozměr 170 × 210 mm
- dvojitý generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORT dle výběru
- napájecí zdroj
- tester magnetického pole
- návod k použití, informačního a obrazového průvodce
- kvalitní tašku pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

## Oblasti těla, na které sadu VIVA PLUS využijete nejlépe:

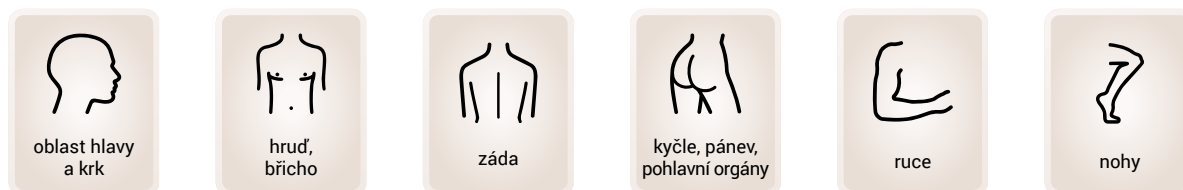

## Popis sady VIVA PLUS, vhodnost použití:

Magnetoterapeutická souprava VIVA PLUS obsahuje tři aplikátory: lůžkový aplikátor střední velikosti LETTINO, kruhový aplikátor CAVO a malý plochý aplikátor MANIC. Tato souprava Vám tedy nabízí skutečné maximum užité hodnoty nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie.

Aplikátor LETTINO díky své velikosti obsáhne celou délku páteře včetně křížokyčelního skloubení a pánve. To je velmi důležité, neboť páteř pracuje jako celek a tak se dysfunkce křížokyčelního skloubení může paradoxně projevit jako bolest hlavy nebo problém s krční páteří. Aplikátor LETTINO regeneruje kostní, vazivovou i nervovou složku páteře v celém jejím průběhu a tím odstraňuje bolesti a pomáhá obnovovat její správnou funkci. Zároveň je možné použít ho k léčbě hemeroidů a problémů s prostatou, k odstranění zánětů a trombóz křečových žil a ke zlepšení prokrvení končetin.

Kruhový aplikátor CAVO generuje homogenní magnetické pole a je proto vhodný k regeneraci hluboko v těle uložených struktur. Uplatní se tedy například při léčbě osteoporózy kostí horních a dolních končetin (výrazně urychlí také hojení zlomenin), artrózy a revmatoidní artritidy. U těchto kloubních onemocnění je důležité rovnoměrné působení pulzního magnetického pole ve všech vrstvách tkáně, což kruhový aplikátor zajistí. Umožní tak regeneraci buněk vaziva i chrupavky, optimalizuje produkci kloubního mazu a odstraní případné otoky a zánětlivé komplikace. Svým harmonickým působením pomáhá také odstraňovat migrény, léčí záněty horních cest dýchacích a bolesti krční páteře nejrůznějšího původu.

Aplikátor MANIC díky své velikosti generuje intenzivní magnetické pole a je velmi vhodný k tlumení nejrůznějších bolestí. Jeho analgetické a regenerační působení ocení nejen lidé s artrózou či revmatoidní artritidou kolenních a kyčelních kloubů, ale také ti, které trápí potíže s tenisovým loktem nebo syndrom karpálního tunelu. Je možné jej využít k intenzivní cílené terapii a regeneraci nejrůznějších orgánů a tkání, k uvolnění svalových spasmů, uplatní se při léčbě hučení v uších (tinnitus, Meniérova choroba) či zánětu středouší a dobře účinkuje také při bolestech zubů a paradentóze.

## Aplikátory v sadě VIVA PLUS:



### Deskový aplikátor LETTINO

- rozměr 310 × 1 010 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru LETTINO najdete na straně 30*

## Aplikátory v sadě VIVA PLUS:



### Deskový aplikátor MANIC

- rozměr  
170 × 210 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru MANIC najdete na straně 24*



### Kruhový aplikátor CAVO

- průměr 260 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru CAVO najdete na straně 36*

## Výběr generátoru:

K sadě VIVA PLUS si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídicích jednotek

### Varianta VIVA PLUS FORTE

- s generátorem  
DUO FORTE



*Podrobnější informace o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20*

### Varianta VIVA PLUS

- s generátorem  
DUO COMFORD



*Podrobnější informace o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22*



### MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz)  
nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)

# SADA SIECCO



## Sada SIECCO obsahuje:

- 5dílný aplikátor CASSO, rozměr 550 × 1 730 mm
- deskový aplikátor MANIC, rozměr 170 × 210 mm
- dvojitý generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORT dle výběru
- napájecí zdroj
- tester magnetického pole
- návod k použití, informačního a obrazového průvodce
- kvalitní tašku pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

## Oblasti těla, na které sadu SIECCO využijete nejlépe:



## Popis sady SIECCO, vhodnost použití:

Magnetoterapeutická souprava SIECO obsahuje velký lůžkový aplikátor CASSO a malý plochý aplikátor MANIC.

Aplikátor CASSO je svými rozměry předurčen pro celkovou regeneraci. Vleže na něm můžete využívat hojivých, analgetických, protizánětlivých a prokrvujících účinků nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie doslova od hlavy až k patě. CASSO je konstrukčně navrženo tak, aby intenzita magnetického pole byla rovnoměrná nad celou plochou aplikátoru, takže každá část Vašeho těla bude ošetřena dostatečně. To je velmi důležité, protože lidský pohybový aparát funguje jako nedělitelný celek a proto například bolesti zad mají často příčinu ve špatné funkci křížokyčelního skloubení, hýžděového svalstva či dokonce kolenou. Aplikátor CASSO svým působením zregeneruje všechny tyto složky a odstraní tak příčinu potíží.

Aplikátor MANIC díky svému tvaru a velikosti generuje silné fokusované magnetické pole a výborně se tak hodí k cílené intenzivní regeneraci nejrůznějších částí těla a k tlumení bolestí. Lze jej tedy použít například při nejrůznějších zraněních, bolestech kloubů, zubů či jednotlivých úseků páteře.

## Aplikátory v sadě SIECCO:



### Deskový aplikátor CASSO

- rozměr 550 × 1 730 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru CASSO najdete na straně 33*



### Deskový aplikátor MANIC

- rozměr 170 × 210 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru MANIC najdete na straně 24*



## Výběr generátoru:

K sadě SIECCO si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídicích jednotek

### Varianta SIECCO FORTE

- s generátorem DUO FORTE



*Podrobnější informace o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20*

### Varianta SIECCO

- s generátorem DUO COMFORD



*Podrobnější informace o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22*



### MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz)  
nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)


# SADA VIERA



## Sada VIERA obsahuje:

- kruhový aplikátor VIERA, průměr 650 mm
- dvojitý generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORT dle výběru
- napájecí zdroj
- tester magnetického pole
- návod k použití, informačního a obrazového průvodce

## Oblasti těla, na které sadu VIERA využijete nejlépe:

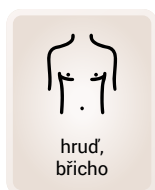

## Popis sady VIERA, vhodnost použití:

Souprava pro pulzní magnetoterapii VIERA s jediným stejnojmenným aplikátorem je určena především pro profesionální použití v lázeňských a rehabilitačních zařízeních, v ordinacích fyzioterapeutů a v neposlední řadě také v domovech a stacionářích pro seniory či tělesně postižené, které svým klientům poskytují zdravotní péči.

Aplikátor VIERA je velký kruhový aplikátor o průměru 65 cm, který svými rozměry umožňuje umístit pacienta dovnitř homogenního (stejněměrného) pulzního magnetického pole, které rovnoměrně prostoupí celou tloušťku ošetřované tkáně. Jeho regenerační, protibolestivé a protizánětlivé účinky se tak mohou naplno projevit například u artrózy kolenních a kyčelních kloubů, revmatoidní artritidy, bolestí zad nejrůznějšího původu, osteoporózy a mnoha dalších onemocnění. Zvláště u osteoporózy, která se nejrizikověji projevuje řídnutím kostní tkáně v oblasti krčků kyčelních kloubů a bederních obratlů, je použití pulzní magnetoterapie prostřednictvím tohoto aplikátoru velmi důležité.

## Aplikátor v sadě VIERA:



### Kruhový aplikátor VIERA

- průměr 650 mm

*Podrobnější informace o aplikátoru VIERA najdete na straně 41*

## Výběr generátoru:

K sadě VIERA si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídicích jednotek

### Varianta VIERA FORTE

- s generátorem DUO FORTE



*Podrobnější informace o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20*

### Varianta VIERA

- s generátorem DUO COMFORD



*Podrobnější informace o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22*



### MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!

Napište nám na e-mail [podpora@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:podpora@pulzni-magnetoterapie.cz) nebo volejte bezplatnou infolinku **800 810 800**

Více informací najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)



# KDY NESMÍ BÝT MAGNETOTERAPIE POUŽITA

## **Absolutní kontraindikace**

- Při používání citlivých lékařských elektronických zařízení jako jsou kardiostimulátor, defibrilátor, voperovaný endokochleární implantát, apod.
- V těhotenství. Přesto, že nejsou známy zprávy o negativním působení magnetických polí, je nutná předběžná opatrnost.
- Při krvácení jakéhokoli původu. Magnetické pole zvyšuje prokrvení tkání a tím by se krvácení v některých případech mohlo zvýšit.
- Při bolestech neznámého původu.


## **Relativní kontraindikace**

- Při hyperfunkci endokrinních žláz (zvýšená funkce) neaplikujeme v jejich lokalitě.
- U osob s diagnózou tumoru a po operaci zhoubného nádoru nebo léčbě chemoterapií či radioterapií je aplikace na zvážení lékaře.
- Při infekčním onemocnění během teplot nad 38 °C. Současně s antibiotiky je však plně indikována, pomůže zlepšit jejich vstřebávání a účinnost.
- Aktivní tuberkulóza – dle zvážení lékaře
- Při záchvatovitých neurologických onemocněních jako je epilepsie apod. neaplikujeme na oblast hlavy, pouze na doporučení neurologa.
- U závažných mykotických (plísňových) onemocnění. S léčivou masťou či antibiotiky je však indikováno.
- Nedoporučuje se kombinace s radioterapií. Naopak, kombinace se světloléčbou či laserem je indikována.

**Při jakýchkoli nejasnostech ohledně léčby pulzní magnetoterapií konzultujte její použití s odborným lékařem!**

# APLIKAČNÍ BODY PRO POUŽITÍ MAGNETOTERAPIE

Na nákresu lidského těla jsou čísla označena místa, na která je vhodné přikládat aplikátory magnetického pole při jednotlivých onemocněních (**viz strana 79 a 80**). Aplikální body jsou výsledkem dlouhodobého výzkumu českých i zahraničních lékařů. Při neznámých bolestech navštivte svého lékaře, aby stanovil Vaši diagnózu.

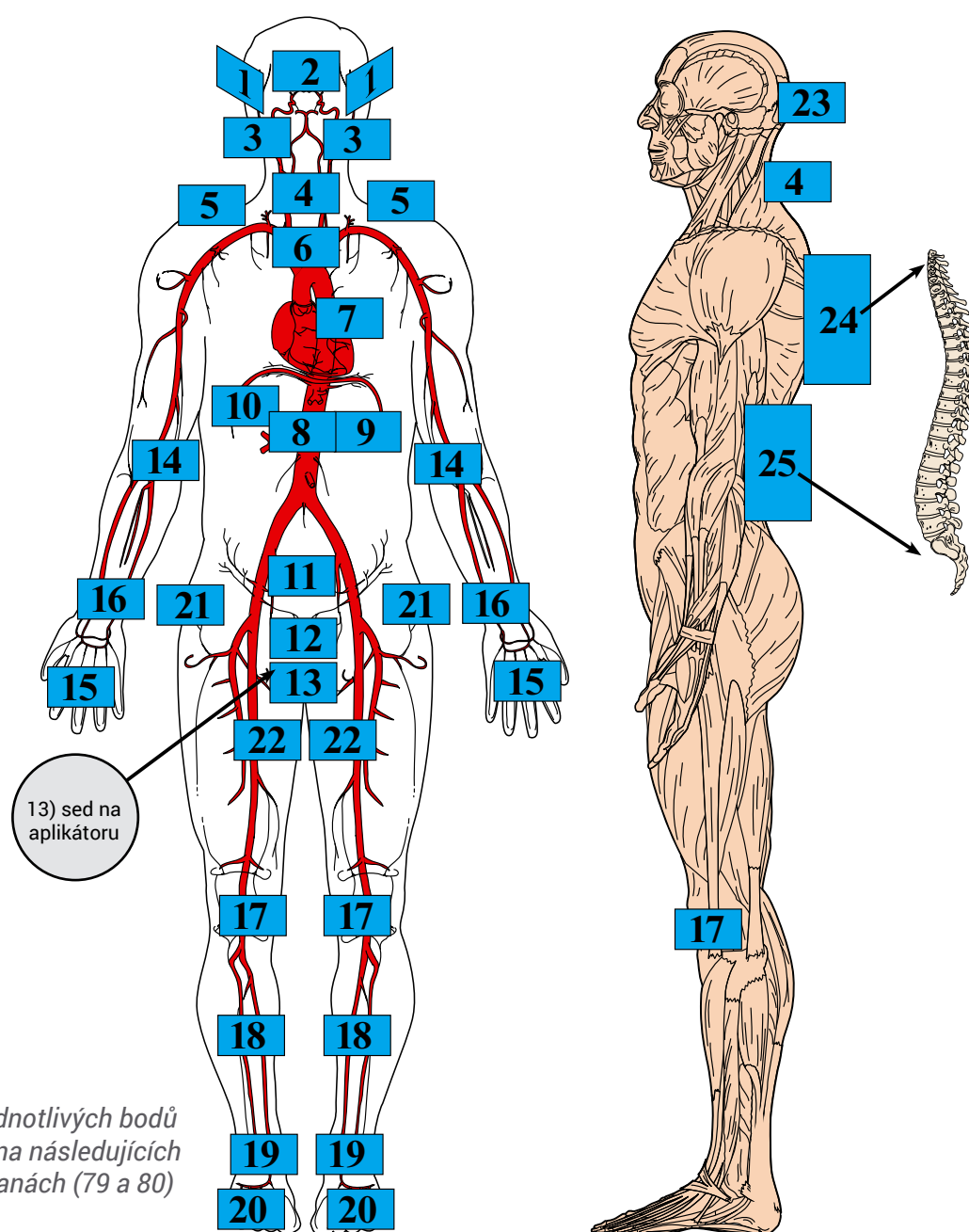

**1)** zánět středního ucha (pravého nebo levého, popř. oboustranný zánět), počáteční fáze bez hnisavého výpotku

bolesti čelistního kloubu

tinnitus (pískání v uchu), podpořeno medikací

parkinsonův syndrom, podpořeno medikací

migrény

**2)** zánět čelních dutin (počáteční fáze)

rýma z nachlazení či rýma chronická

regenerace oční sítnice

atrofie optiku, jako podpůrná léčba

perforace rohovky (úrazy, operace), k dohojení

**3)** bolest a zánět zubů

paradentóza

postextrakční bolest (bolesti po vytržení zubů, avšak nikoli ihned po zákroku!)

bolest trojklanného nervu, jako podpůrná léčba

**4)** bolesti při blokáдах krční páteře

bolesti hlavy

syndrom karpálního tunelu

poruchy prokrvení rukou (mravenčení)

nachlazení – chrapot

zánět hltanu

**5)** bolestivá ztuhlá ramena (tzv. zmrzlá ramena)

artralgie či artróza ramenních kloubů (bolesti kloubů)

**6)** astma, jako podpůrná léčba

bronchitida, jako podpůrná léčba

vysoký krevní tlak

škytavka

**7)** regenerace srdečního svalu po odeznění infarktu

po operaci bypassu

zúžení věnčitých cév (ischemická choroba srdeční)

srdeční tachyarytmie (zvýšení tepu)

**8)** zánět, křeče a překyselení žaludku

chronická vředová choroba žaludku či dvanáctníku (nikoli při současném krvácení!)

**9)** zánět slinivky břišní – pankreatidy (chronické)

cukrovka (aplikátor přikládat vlevo vzadu)

**10)** regenerace jater

**11)** neplodnost u žen způsobená zánětem vejcovodů

zácpa, špatné vyprazdňování

**12)** zánět močového měchýře, zvláště u žen, jako podpůrná léčba

prostatitida u mužů

č. 12 a č. 25 pomočování u dětí (enuréza)

**13)** prostatitida

sexuální dysfunkce u mužů

sexuální ochablost

hemeroidy (pokud nekrvácejí)

**14)** akutní i chronický „tenisový loket“, bolesti lokte (artróza)

**15)** zánět kloubů v rámci dohojení

revmatické potíže

zápěstí-polyarthritis progresiva

**16)** č. 16 a č. 4 syndrom karpálního tunelu

**17)** bolesti až artróza kolenních kloubů

špatné prokrvení dolních končetin u diabetiků (diabetická noha)

**18)** špatné prokrvení dolních končetin u diabetiků (diabetická noha)

osteoporóza holenních kostí

chronické bércové vředy (nikoli krvácející) jako podpůrná léčba

zánět kostní dřene (osteomyelitis) spolu s antibiotiky!

**19)** bolesti nártů a kotníků

otoky kotníků

špatné prokrvení dolních končetin u diabetiků (diabetická noha)

**20)** revmatické potíže

dna, bolesti u ostruhy

špatné prokrvení dolních končetin u diabetiků (diabetická noha)

**21)** bolesti u artrózy kyčelních kloubů

osteoporóza krčků kyčelních kloubů

**22)** špatné prokrvení dolních končetin u diabetiků (diabetická noha)

**23)** migrény

Parkinsonův syndrom, podpořeno medikací

křeče (ne epileptické)

fantomové bolesti chybějících končetin

**24)** regenerace krční a hrudní páteře

syndrom karpálního tunelu

částečná nedoslýchavost

degenerace míchy různého původu

výrůstky na páteři

Bechtěrevova nemoc

osteoporóza páteře

fantomové bolesti chybějících končetin

**25)** ischias, bolesti v bedrech a kříži

bolesti ledvin, v počátcích ledvinových kamenů zlepšit jejich vyplavení

osteoporóza páteře



# KONTAKTNÍ INFORMACE

Výrobce magnetoterapeutických  
přístrojů Renaissance®

**ZES Brno, a.s.**

Sladovnická 4

620 00 BRNO

Česká republika

IČ: 49969510


DIČ: CZ49969510

**Bezplatná infolinka: 800 810 800**

Telefon (pevná linka): (+420) 530 501 522

E-mail: [info@pulzni-magnetoterapie.cz](mailto:info@pulzni-magnetoterapie.cz)

Web: [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz)

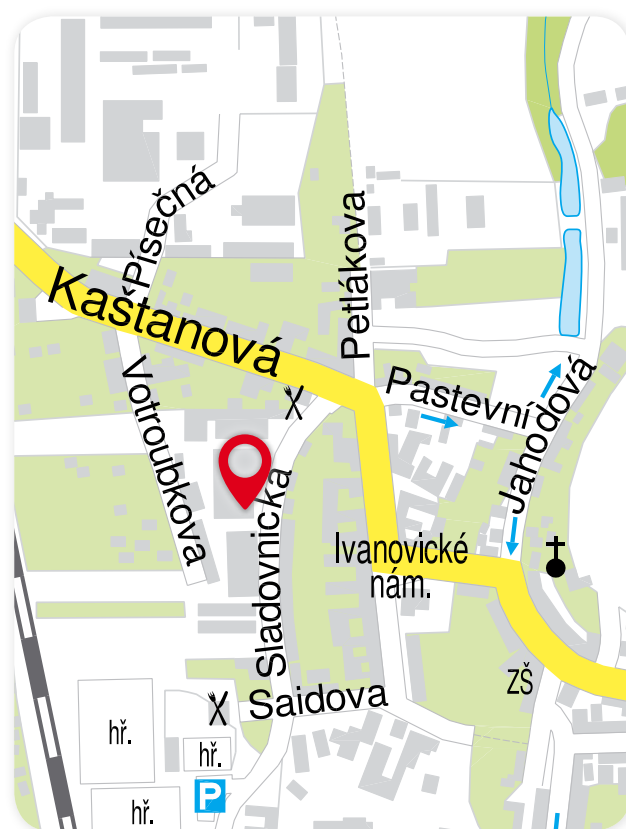

*Aktuální informace o konkrétních kontaktních osobách najdete na webových stránkách [www.pulzni-magnetoterapie.cz](http://www.pulzni-magnetoterapie.cz) v rubrice "Kontakt"*



**RENAISSANCE®**

*Život bez bolesti a omezení*