



CAVEX

VÝHODY


plnoautomatický

předvídatelný

čistý

vždy homogenní pasta
bez vzduchových
bublinek

úspora času

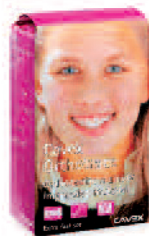


AT240



AT530



AT511

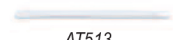

AT513



AT021



AT040



HA001



AT076

Perfektní otisk není žádná náhoda.

Přehled produktů

AT521	Cavex Alginate Mixer II, včetně 10 x 500 g Cavex CA37 Normal Set
AT522	Cavex Alginate Mixer II, včetně 10 x 500 g Cavex Impresional NS
AT523	Cavex Alginate Mixer II, včetně 10 x 500 g Cavex ColorChange
AT524	Cavex Alginate Mixer II, včetně 10 x 500 g Cavex Orthotrace

Cavex doporučuje používat v mixeru alginátových otiskovacích hmot Cavex normální sadu alginátů.

Tento aparát mixuje velmi intenzivně, takže rychlost reakce komponentů bude vyšší. Použití fast settingu může pro některé zubaře a indikační oblasti znamenat příliš krátkou dobu na zpracování.

Příslušenstv

AT240	Zásobník na alginátové otiskovací hmoty Cavex: s odměrkou na prášek, kondicionuje prášek, snadno se otevírá a zavírá.
AT530	Míchací miska pro mixer Cavex Alginate Mixer II.
AT511	Plastová špachtle pro mixer alginátových otiskovacích hmot Cavex.
AT513	Plastová míchací špachtle pro mixer alginátových otiskovacích hmot Cavex.
AT040	Skladovací kontejner na alginátové otiskovací hmoty Cavex, vzduchotěsný a vlhkotěsný..
AT076	Odměrka na prášek Cavex, nerozbitná, s šikvou dlouhou rukojetí. Odměrka na vodu Cavex, nerozbitná, se 4 odměrnými ryskami, vhodná pro ortodoncii.
AT021	Dávkovací zásobník na vodu, snazší dávkování. Voda je neustále v pokojové teplotě.
HA001	Cavex GreenClean, neutrální pH, čistí misky, špachtle a instrumenty.

Změny modelu vyhrazeny

Alginátové otiskovací hmoty a příslušenství Cavex dodává váš dodavatel dentálních pomůcek. Ohledně bližších informací o složení výrobku a jeho použití můžete kontaktovat Cavex, +31 23 530 77 00 nebo www.cavex.nl

CAVEX



To nejkrásnější, co může potkat balíček alginátu - mixer na alginátové otiskovací hmoty Cavex



Otiskovací hmoty stojí
na začátku mnoha
stomatologických
ošetření. Díky kvalitním
otiskům může mít zubař
důvěru v dobrý konečný
výsledek. Cavex nabízí
vyzkoušenou a
spolehlivou řadu
alginátových
otiskovacích hmot,
hydrokoloidu a pomůcek,
navržených podle
požadavků dentální
ordinace.

Your impression is
our concern

Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
The Netherlands

CAVEX YOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN

CAVEX YOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN

ZYA092CZ.00

Tak krásnou, homogenní pastu jste nikdy dříve neviděli.

V ordinaci jsou samozřejmě fantastické asistentky. Asistentky, které chtějí míchat krásnou, hladkou alginátovou pastu, téměř bez hrudek a vzduchových bublinek.

Ale asistentka, která soutěží s mixerm alginátových otiskovacích hmot Cavex, podstupuje riziko fraktury zápěstí. Mnohočetnou, nanejvýš účinnou a rychlou rotaci v mixeru, různými směry, nelze napodobit.

Výsledek rovněž ne. Vždy znovu identická, homogenní pasta, bez nerozmíchaného materiálu, bez bublinek vzduchu. A navíc ještě doba míchání: Maximálně 8 až 12 sekund. Pro tuhou alginátovou otiskovací hmotu je mixer alginátových otiskovacích hmot Cavex samozřejmě naprosto ideální.

Znalosti a schopnosti udělat dobrý otisk zůstávají stejné. Stejně jako starost o to, aby se otisk pro laboratoř uložil do dobře uzavřeného sáčku.



A vaše asistentka? Zeptejte se jí. Možná, že je mixer alginátových otiskovacích hmot Cavex také to nejkrásnější, co ji může potkat.

Od namáhavé ruční práce ke stisknutí tlačítka



Mixer alginátových otiskovacích hmot Cavex, stvořený pro alginátové otiskovací hmoty Cavex.

Ten nejlepší materiál, alginátová otiskovací hmota Cavex, si zaslouží perfektní namíchání. Plnoautomatický mixer alginátových otiskovacích hmot Cavex vynikajícím způsobem zapadá do snahy společnosti Cavex garantovat stomatologům optimální pastu pro perfektní otisky.

Od nejistoty k jistotě.

Reprodukovatelnost je požadavkem moderní stomatologie. Ruční práce způsobuje malé variace v pastě, které mají vliv na kvalitu a na dobu trvání tvrdnutí otisku. Mixer alginátových otiskovacích hmot Cavex provádí svou práci vždy stejným způsobem. Můžete si být jisti.

Od kompromisu k perfektní pastě.

Kdo dokáže z pasty odstranit všechny hrudky, aniž by vznikly vzduchové bublinky? Ruční míchání vede často ke kompromisu mezi tím, čeho se dá pracně dosáhnout a co je přijatelné. S mixerm alginátových otiskovacích hmot Cavex nebudete spokojeni dříve, dokud nebude pasta naprosto homogenní.

Od minut k sekundám.

Úspora času se zdá nepatrná, ale musíte ji vidět kumulativně. Namáhavý a zdoluhavý proces míchání se zkrátí na sekundy. Stejně tak plastová míchací

miska je obratem ruky zase čistá. Vy nebo vaše asistentka budete moci uspořený čas krásně využít jinak.

Od neuspořádanosti k řádu.

Povalující se špachtle, kelímky na míchání a jiné materiály patří minulosti. Mixer alginátových otiskovacích hmot Cavex může stát kdekoli na ploše pouhých 20x25 cm, stojí stabilně i při mixování a vypadá spořádaně.

S komplimenty z laboratoře.

Můžete očekávat reakci z laboratoře, že vaše otisky mají lepší výsledky než kdykoli předtím. Perličky kvůli bublinkám vzduchu se na odlitém sádrovém modelu již nevyskytují.



FAKTA & ČÍSLA

Technické specifikace Mixeru alginátových hmot

Napětí	AC 220 – 230 V, 50/60 Hz	
Výkon	220 W	
Počet otáček	3.400 ot/min	
Časovač	nastavitelný po sekundách	1 - 16 s
Paměťová místa	Tři naprogramovaná nastavení: 8, 10 a 12 sekund. Také možnost vlastního programování.	
Rozměry	š x h x v = 205 x 250 x 285 mm	
Hmotnost	16 kg	

Od prášku k pastě během 10 sekund

K mixeru alginátových otiskovacích hmot Cavex obdržíte podrobný návod k použití. Funkce je ale tak jednoduchá, že je možné ji vysvětlit na několika obrázcích.



Nadávkuje množství prášku a vody podle předpisu.

Prášek a vodu lehce zamíchejte míchací špachtlí.



Míchací misku dobře uzavřete.

Dejte naplněnou a uzavřenou míchací misku do mixeru.



Je víčko dobře uzavřeno? Stiskněte tlačítko.

Speciální měrnou špachtlí nabíráte alginátovou pastu z misky.